


INSTRUCTIONS FOR USE

Pediatric Defibrillation Pads

Use with Cardiac Science® Powerheart® G5 AED for emergency treatment of sudden cardiac arrest.

The AED automatically identifies electrode pads connected to it and adjusts the maximum shock energy.

- For children up to 8 years of age or up to 55lbs (25kg)
- If child appears older or heavier, use non-pediatric defibrillation pads. Do not delay treatment to determine child's exact age/weight.
- Intended for short-term use (<8 hrs)
- Use before expiration date listed on package.
- The AED automatically reads the expiration date of the electrode pads, and notifies the user of expired pads.

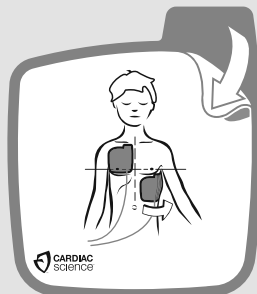

WARNING! Do not reuse pads.

Reuse of pads may result in skin burns, improper AED performance or patient-to-patient contamination.



DO NOT open until ready to use.

DO NOT use damaged pads.

Failure to remove blue plastic completely could impact therapy delivery. Before use, check cable and connectors for damage.

DO NOT pull on the lead wires to separate the pads from the blue plastic.

Not intended for use in pacing.



WARNING! Not for adult use.

Pediatric defibrillation pads are for use only with children 8 years of age or younger, or 55lbs (25kg) or lighter.

When placing pads:




Place the pad at least an inch from any implanted device.

Ensure patient's skin is clean and dry before use.



Manufactured for:

Cardiac Science Corporation
N7 W22025 Johnson Dr
Waukesha, WI 53186-1856 USA
www.cardiacscience.com

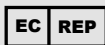

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

English

Patents pending.

For a complete list of U.S. and foreign patents, see www.cardiacscience.com.



0086



Not made with
natural rubber latex


Cardiac Science, Powerheart, the Shielded Heart logo and Rescue Ready are trademarks of Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2015 Cardiac Science Corporation.


All Rights Reserved.



INSTALL PEDIATRIC PADS

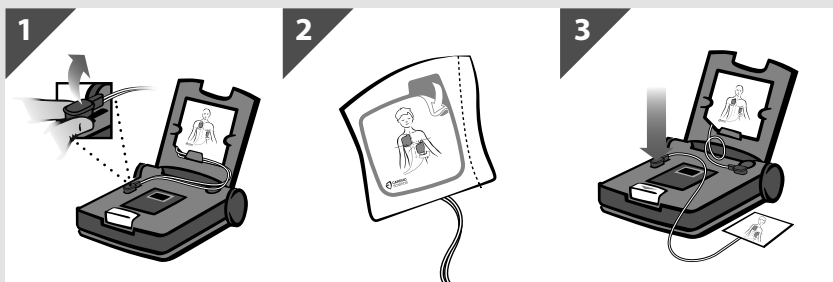


HOW TO APPLY PADS

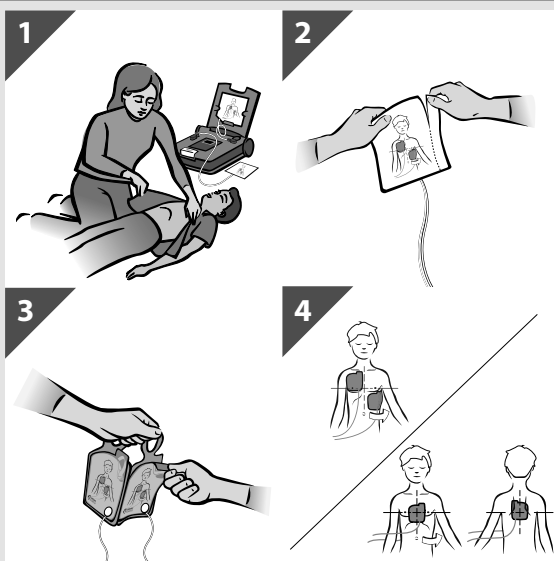

AFTER THE RESCUE

RECONNECTING THE NON-PEDIATRIC PADS

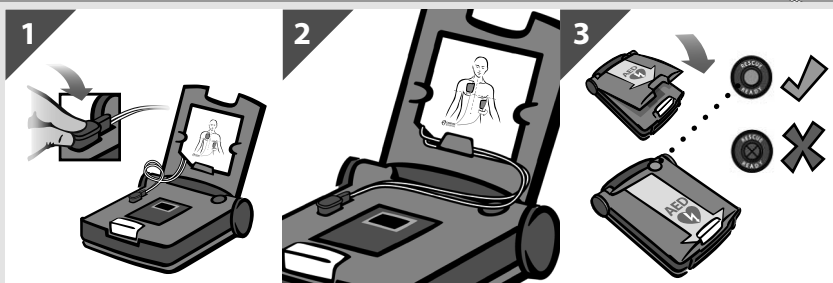


BRUKSANVISNING

Pediatriiska defibrilleringselektroder

Använd med Cardiac Science® Powerheart® G5 AED för akutbehandling av plötsligt hjärtstopp.

AED-enheten identifierar automatiskt de elektroder som är anslutna till den och justerar maximal stötenergi.

- För barn upp till 8 år eller som väger upp till 25 kg
- Om barnet verkar äldre eller tyngre använder du icke-pediatriiska defibrilleringselektroder. Fördröj inte behandlingen för att fastställa barnets exakta ålder eller vikt.
- Endast avsedda för korttidsanvändning (< 8 timmar)
- Använd före utgångsdatumet som anges på förpackningen.
- AED-enheten läser automatiskt av utgångsdatumet för elektroderna och användaren får ett meddelande om att utgångsdatumet för elektroderna har passerats.

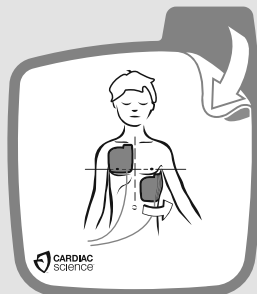

WARNING! Elektroderna får inte återanvändas.

Återanvändning av elektroder kan resultera i brännskador på huden, felaktiga AED-prestanda eller att smitta överförs mellan patienter.



Öppna INTE före användningstillfället.

Använd INTE elektroder som är skadade.

Om den blå plastfilmen inte avlägsnas helt kan det inverka på behandlingskapaciteten. Kontrollera att kabeln och anslutningarna inte är skadade före användning.

Dra INTE i avledningskabeln för att dra av elektroderna från den blå plastfilmen. Ej avsedda att användas vid pacing.



WARNING! Ej för användning på vuxna patienter.

Pediatriiska defibrilleringselektroder är endast avsedda att användas på barn upp till 8 år eller barn som väger högst 25 kg.

Vid placering av elektroder:




Placera elektroden minst 2,5 cm (1 tum) från eventuell implanterad enhet. Se till att patientens hud är ren och torr före användning.



Tillverkad för:

Cardiac Science Corporation
N7 W22025 Johnson Dr
Waukesha, WI 53186-1856 USA
www.cardiacscience.com

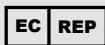

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Tyskland

Svenska

Sökta patent finns.

En fullständig lista över patent i USA och andra länder finns på www.cardiacscience.com.



0086

Innehåller inte naturligt gummilatex


Cardiac Science, Powerheart, logotypen med hjärtsymbolen och Rescue Ready är varumärken som tillhör Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2015 Cardiac Science Corporation.


Med ensamrätt.



INSTALLERA PEDIATRISKA ELEKTRODER.

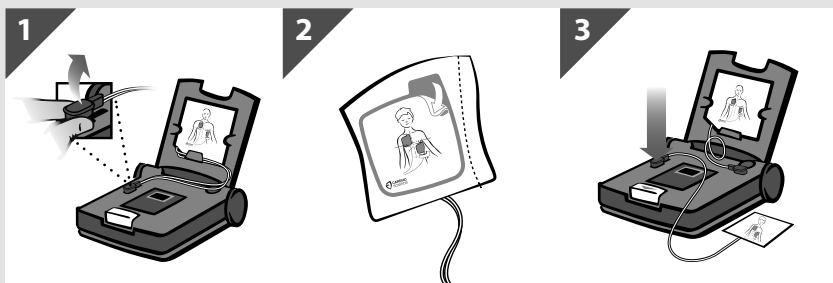

SÅ HÄR APPLICERAR DU ELEKTRODERNA

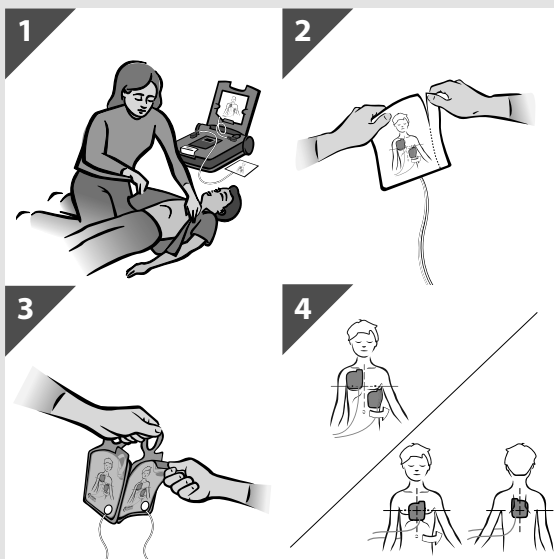

EFTER RÄDDNINGEN

ANSLUT ELEKTRODERNA (EJ PEDIATRISKA)

